

CellVue® 处理与分析命令——平场校正

软件版本：V1.0

文件版本：V1.0


发版日期：2026.03.20

**Future
Beyond
Sight.**
未来始于远见

01 平场校正命令

本文档指导用户如何在CellVue图像处理与分析软件中，正确配置和应用平场校正命令。

平场校正命令利用一张空白参考图，可补正图像中由硬件系统固有特性导致的非均匀性照明和固定模式的噪声。通常用于处理“中间亮、四角暗”的典型图像。

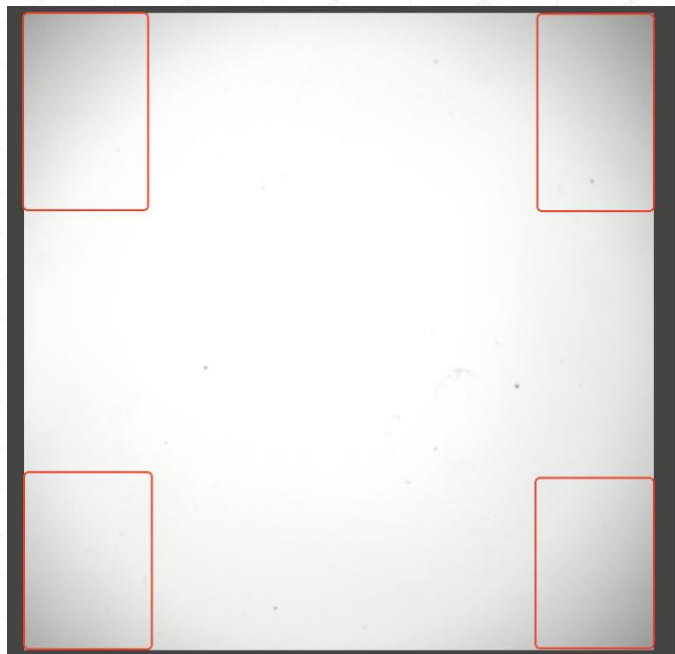

明场图像，中间亮，四周偏暗



平场校正后的结果，整体均匀、背景干净

02 命令配置

左键单击平场校正命令，打开配置界面。各参数说明如下：

a

1 Flat-field Correction

图集	视野	层高	通道
Source Image ▾	05_07 ▾	All ▾	All ▾

b

文件配置

BF LED matrix full White	D:\Image\CellVue分析软件	浏览
Fluorescence 405 nm Ex		浏览
Fluorescence 488 nm Ex		浏览
Fluorescence 561 nm Ex		浏览
Fluorescence 638 nm Ex		浏览

a. 图集/视野/层高/通道：选择需要平场校正的图集及相应的视野、层高、通道信息。**注意：**下拉选项由软件根据输入图集自动获取。

b. 文件配置：由软件根据所选的图集自动获取校正文件。如需修改，可点击[浏览]重新选择。


- 多通道成像时，每个通道分别对应一个校正文件。
- 校正时，软件参考该图，自动抵消原图中存在的相同不均匀性，使图像均匀化。
- 通常，可在“C:\ProgramData\CellVue\CellVue\FlatFieldBackground”目录中查找对应的校正文件。

02 命令配置

c. 输出名称：保持默认。投影后，可根据名称在图像显示区中查找结果图像。




d. 保留文件：保持默认，即不单独保存结果图像。示例如下图，文件夹中仅包含配置文件，不包含结果图像。

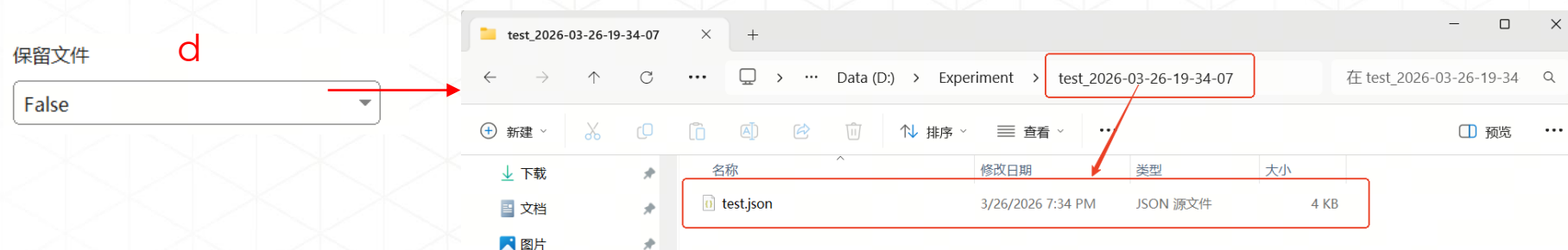


03 典型应用示例

- 典型现象：图像拼接后，每个视野图像呈现规律性的中间亮、四周暗。
- 可能原因：光照不均匀。
- 处理方法：拼接前，先对图像进行平场校正。**注意：**拼接时启用消除拼缝功能，也能实现相同的处理效果。

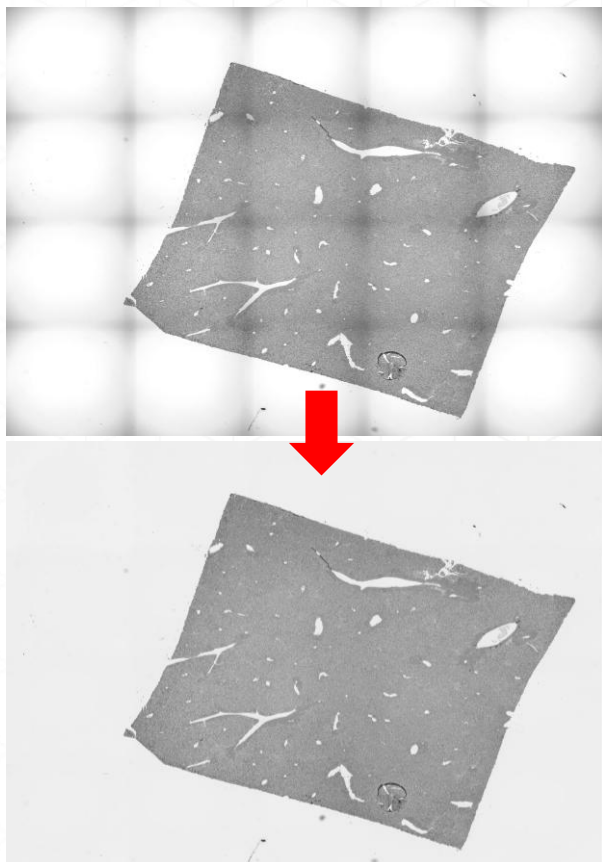

明场图像

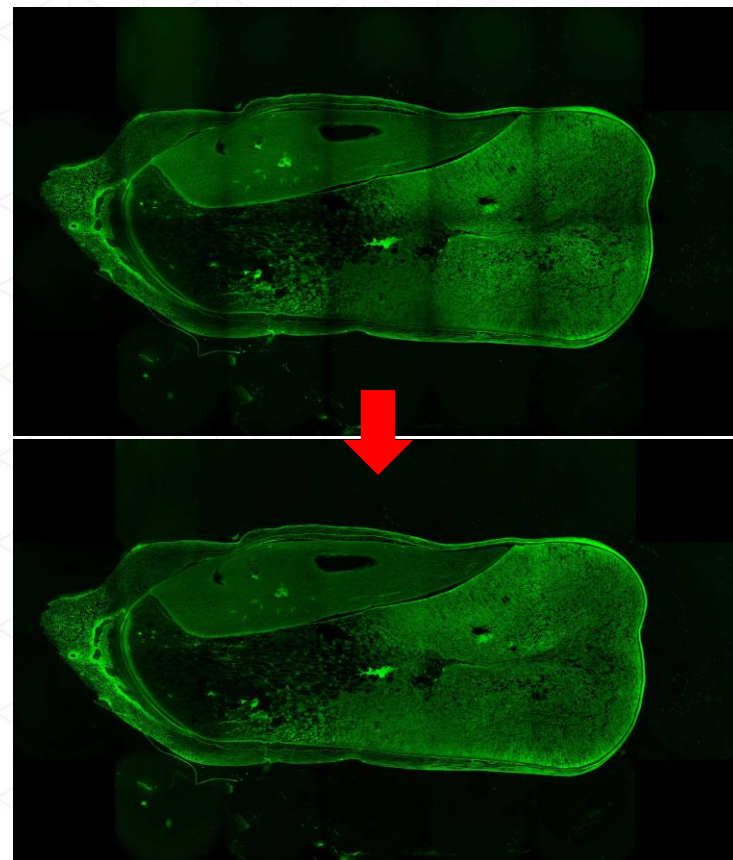

荧光图像

谢谢

如需了解更多信息，可与镁伽联系：

邮箱：officialmail@megarobo.tech

电话：400-0601-017

本文档仅供科研使用，不用于临床诊断；文档内的所有信息、说明和性能指标如有变更，恕不另行通知。